

ACCU-CHEK®



ACCU-CHEK®
Guide

SIMPLY MORE


Monitor in the dark

The Accu-Chek Guide meter has a bright backlit display and a strip port light.



Helping you manage your diabetes

When it comes to diabetes, we believe in personalized treatment because we want you to get the most out of life.

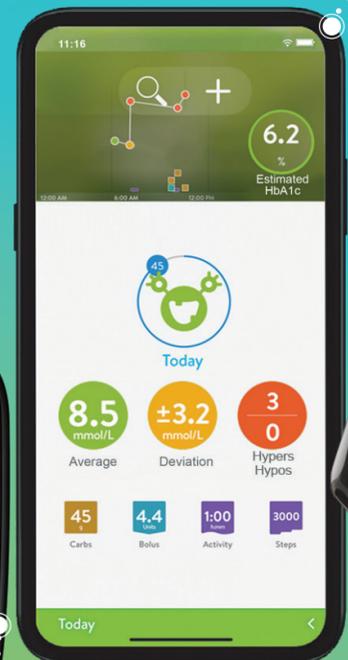

No-touch strip removal

With the strip ejector button, a single click is all it takes for fast, easy and hygienic removal of strips.



Spill-resistant

The vial is designed to hold your strips tightly in place, even upside down!



Widest** dosing area on the market

Apply a small drop of blood anywhere on the yellow edge of the strip.

Advanced accuracy

Results you can trust: Accu-Chek Guide strips exceed the current ISO standard.***



All your diabetes data in one place

Accu-Chek Guide syncs quickly with the mySugr® app.

Pair it once and your values will be transferred automatically from your meter into the app.

Plus, unlock mySugr PRO for FREE.*

Knowing your blood sugar levels and monitoring your data has never been so simple!



mySugr

How to start transferring your blood sugar levels automatically into the mySugr app

1. Download the mySugr app.



2. Open the app and select "Connections" from the menu.

3. Select "Accu-Chek Guide" and click on "Connect."

4. Turn on the Accu-Chek Guide meter and go to your "Settings."

5. Select "Wireless" and press "OK." Then select "Pairing" and press "OK." Then select "Pair Device" and press "OK."

6. Enter the code displayed on your meter into the notification on your smart device and confirm the pairing.

7. Return to "Wireless" in your meter settings and turn on "Auto-Send."



1. Average app rating in App Store and Google Play Store worldwide, 2023-03-01, 2023-05-31.
2. As of June 19, 2023.

ACCU-CHEK®
engage™

With Accu-Chek Guide, get exclusive access to the engage program:

> Unlock 24/7 diabetes support

> Redeem special offers

> Automatically activate your lifetime meter warranty†

Sign up today!

Go to engageProgram.ca or scan this code.



Need help signing up?


Contact Accu-Chek Customer Care: 1-800-363-7949
Mon.- Fri., 9 a.m.-6 p.m. (ET)



†As part of the Lifetime Warranty, you will receive support and assistance in the use of your Accu-Chek products throughout their lifetime. In the event of a defect or problem during normal use, we will provide you with a replacement product or a newer model for the lifetime of the product.

Roche

SIMPLY MORE

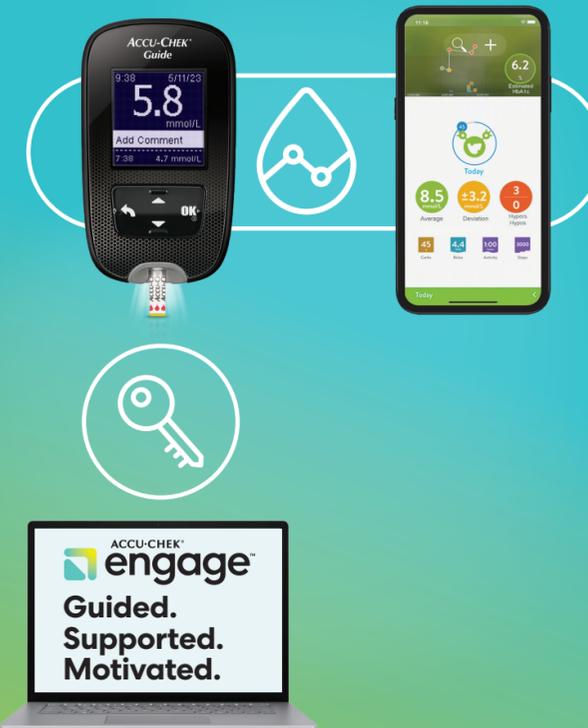

About Roche

Roche has been pioneering innovative diabetes technologies and solutions for more than 40 years. We offer a holistic, patient-centric approach for diabetes management, bringing true relief to people living with diabetes worldwide.

SIMPLEMENT PLUS

Mesurez dans l'obscurité

Le glycomètre Accu-Chek Guide possède un écran rétroéclairé et une fente d'insertion éclairée.



Pour vous aider à gérer votre diabète

Lorsqu'il est question de diabète, nous croyons en un traitement personnalisé parce que nous souhaitons que vous puissiez profiter de la vie au maximum.

Retrait de bandelette sans contact

Avec le bouton d'éjection, un simple clic suffit pour un retrait hygiénique, rapide et facile des bandelettes.

Vos données sur le diabète à un seul endroit

Accu-Chek Guide se synchronise rapidement avec l'application mySugr®. Il suffit de le jumeler une fois pour que vos valeurs soient transférées automatiquement de votre glycomètre à l'application. De plus, obtenez mySugr PRO GRATUITEMENT*. Connaître votre glycémie et surveiller vos données n'a jamais été aussi simple!



mySugr

Comment commencer à transférer vos valeurs de glycémie automatiquement dans l'application mySugr

1. Téléchargez l'application mySugr.



2. Ouvrez l'application et sélectionnez « Connexions » dans le menu.

3. Sélectionnez « Accu-Chek Guide » et cliquez sur « Connecter ».

4. Allumez le glycomètre Accu-Chek Guide et accédez à vos « Réglages ».

5. Sélectionnez « Sans fil » et appuyez sur « OK ». Puis, sélectionnez « Liaison » et appuyez sur « OK ». Enfin, sélectionnez « Lier dispositif » et appuyez sur « OK ».

6. Entrez le code affiché sur votre glycomètre dans la notification de votre appareil intelligent et confirmez le jumelage.

7. Retournez à « Sans fil » dans les réglages de votre glycomètre et activez « Envoi automatique ».



1. Note moyenne de l'application dans l'App Store et Google Play Store dans le monde entier, 01-03-2023, 31-05-2023, 2. Au 19 juin 2023.

Anti-renversement

Le contenant est conçu pour tenir fermement les bandelettes en place, même à l'envers!

La surface d'application la plus large** sur le marché

Appliquez une petite goutte de sang sur n'importe quelle partie de la zone de contact jaune.

Une précision de pointe

Des résultats auxquels vous pouvez vous fier : les bandelettes Accu-Chek Guide dépassent les normes de précision ISO*** actuelles.

*Téléchargez mySugr et profitez de plus de fonctionnalités avec mySugr PRO lorsque vous connectez et importez les données de votre glycomètre Accu-Chek Guide (valeur de 37,99 \$ par année). Afin de conserver l'accès à toutes les fonctions PRO, il vous faut synchroniser vos valeurs de glycémie au moins une fois tous les 30 jours. | ** Parmi les principaux fabricants de l'industrie. Données internes. | *** Une nouvelle génération de système de surveillance de la glycémie dépasse les normes internationales de précision (de l'anglais "New Generation Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards"); Ronald L. Brazg, M.D. et coll., Journal of Diabetes Science and Technology, 2016. | APPLE. Le logo APPLE et APP STORE sont des marques de commerce d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. | ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE et MYSUGR sont des marques de commerce de Roche. Tous droits réservés. © 2023 Roche Soins du diabète. CA-1815 10022833001

Avec Accu-Chek Guide, vous obtenez un accès exclusif au programme engage:

> Accéder à du soutien pour le diabète 24/7

> Profiter d'offres spéciales

> Activer automatiquement la garantie à vie de votre glycomètre†

Inscrivez-vous aujourd'hui!

Visitez ProgrammeEngage.ca ou balayez ce code :




Besoin d'aide pour vous inscrire?

Contactez Accu-Chek Soins aux patients: 1 800 363-7949 lun. - ven. de 9 h à 18 h (HE)



† Dans le cadre de la garantie à vie, vous bénéficierez d'un soutien et d'une assistance pour l'utilisation de vos produits Accu-Chek pendant toute leur durée de vie. En cas de défaut ou de problème lors d'une utilisation normale, nous vous fournirons un produit de remplacement ou un modèle plus récent pendant toute la durée de vie du produit.

SIMPLEMENT PLUS

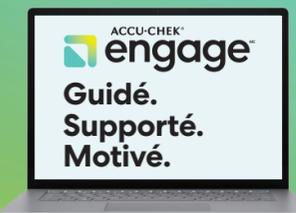

À propos de Roche

Roche est à l'avant-garde des technologies et des solutions innovantes pour la gestion du diabète depuis plus de 40 ans. Nous offrons une approche holistique et centrée sur le patient, apportant un véritable soulagement aux personnes vivant avec le diabète dans le monde entier.