

CONNECT HERE




Downloading the App

ON YOUR MOBILE DEVICE\*

- 1 Open the app store.
- 2 Find the ACCU-CHEK Connect diabetes management app.
- 3 Download and install the app.

\*Visit [accu-chek.ca/dmapp](http://accu-chek.ca/dmapp) for a list of compatible mobile devices.

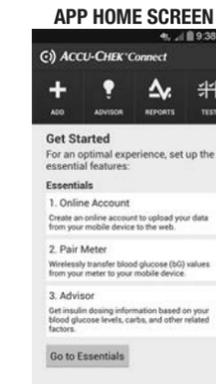


**WARNING**  
Do not share the use of the app with any other user.

Setting up an Online Account

ON YOUR MOBILE DEVICE

The following instructions are to set up your online account via your app; however, you can do this on your PC browser at [www.accu-chekconnect.com](http://www.accu-chekconnect.com)

- 1 Within the app, go to **Settings > Online Account**.
- 2 Select [Click HERE to Create an Online Account](#)

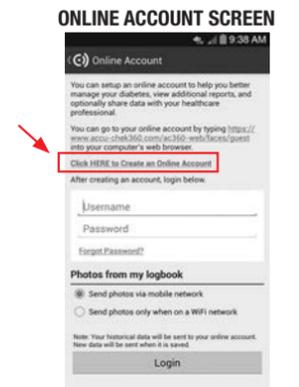


- 3 Add your account information.  
-Username must contain 5–30 characters (letters or numbers only).  
-Password must contain at least 8 characters (both letters and numbers required).

- 4 Select **No** to transfer your existing data unless you are on your PC and are an existing ACCU-CHEK 360<sup>®</sup> diabetes management system user.

- 5 Complete your diabetes-related information.
- 6 Close the browser by selecting the device **Home** button.

BACK BUTTON

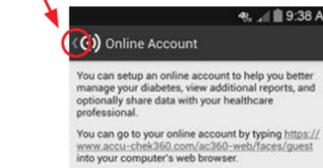


Your app and your online account are now connected for data transfer.

Pairing the Meter and Mobile Device


ON YOUR MOBILE DEVICE

- 1 Within the app, select **Settings/Essentials > Pair Meter**.
- 2 If prompted, ensure **Bluetooth<sup>®</sup>** wireless technology is on.
- 3 Select **Next** to enable **Auto-Send** and **Sync Time**.

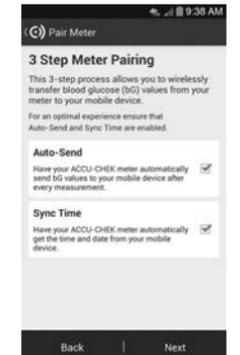

ON YOUR METER


- 4 Turn the meter on and use **OK** or **OK** to navigate and **OK** to select.
- 5 Select **Settings > Wireless > Yes**.

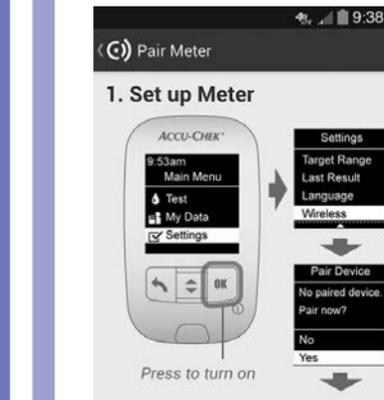

**NOTE:** The code which appears is valid for 90 seconds.

ON YOUR MOBILE DEVICE

- 6 When the code appears on the meter display, select **Next** in the app.
- 7 Select **Accu-Chek**. (Wait for pop-up menu to open.)
- 8 Enter the code from the meter display into the app.
- 9 Close the keyboard and select **OK** to confirm the code.

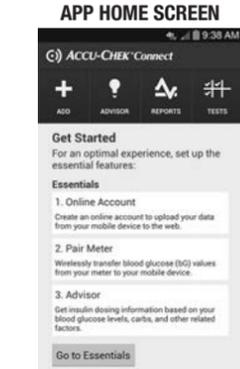


- 10 Wait for pairing process to complete.
- 11 Select **Close** or **Register Meter** after **Pairing successful** appears.
- 12 Select **Back** to return to the Home screen.

**NOTE:** After pairing, you may register your meter directly from the app.

Sending a Blood Glucose Result to Your Mobile Device

ON YOUR METER

After pairing is complete, turn the meter off before you perform a blood glucose test. Once you perform a successful blood glucose test, follow these instructions to send the test result to your mobile device.

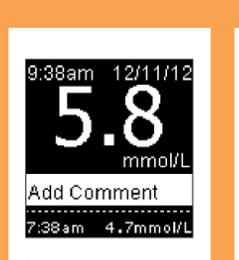


- 1 Press **OK** to add a comment to the test result.



- 2 Press **OK** or **OK** to highlight the desired comment and **OK** to select it. Press **OK** to send.

ON YOUR MOBILE DEVICE

- 3 Your blood glucose result appears on your app Home screen.

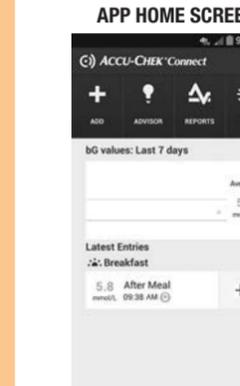

The **Bluetooth<sup>®</sup>** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

ACCUCHEK, ACCUCHEK CONNECT, and ACCUCHEK 360<sup>®</sup> are trademarks of Roche.

LAST UPDATE: 2014-02

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)



POUR SE CONNECTER



Téléchargement de l'application




SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE\*

- Ouvrez la boutique d'applications.
- Cherchez l'Application de Gestion du Diabète ACCU-CHEK Connect.
- Téléchargez et installez l'application.

\*Consultez la page [accu-check.ca/dmapp](http://accu-check.ca/dmapp) pour obtenir une liste des dispositifs mobiles compatibles.

ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION

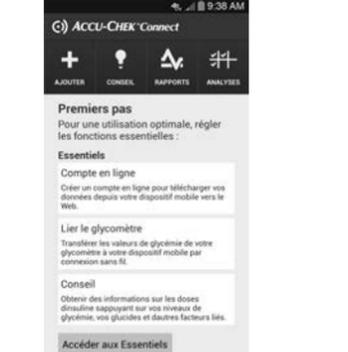

**AVERTISSEMENT**  
Ne partagez pas l'utilisation de cette application avec aucun autre utilisateur.

Création d'un compte en ligne




SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

Les instructions suivantes vous indiquent comment créer votre compte en ligne via l'application. Vous pouvez cependant le faire à partir du navigateur de votre PC à l'adresse [www.accu-checkconnect.com](http://www.accu-checkconnect.com)

- Dans l'application, sélectionnez **Réglages > Compte en ligne**.
- Sélectionnez **Cliquez ICI pour créer un compte en ligne**

ÉCRAN DU COMPTE EN LIGNE

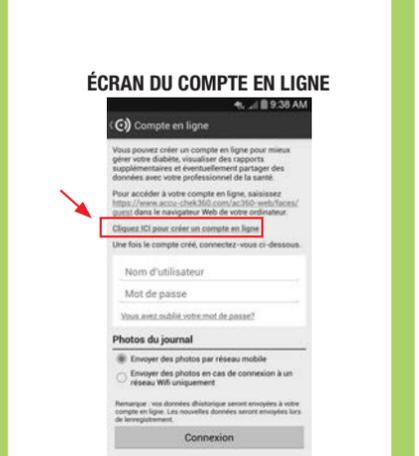


- Saisissez vos identifiants de compte.  
**-Le nom d'utilisateur doit contenir 5 à 30 caractères (lettres ou chiffres uniquement).**  
**-Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères (lettres et chiffres requis).**

- Sélectionnez **Non** pour transférer vos données existantes sauf si vous effectuez les réglages à partir de votre PC et que vous êtes déjà un utilisateur du système de gestion du diabète ACCU-CHEK 360°.

- Saisissez les informations relatives à votre diabète.
- Fermez le navigateur en sélectionnant la touche **Accueil** du dispositif.

- Ouvrez à nouveau l'application.
- Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** que vous venez de créer dans votre **Compte en ligne** et sélectionnez **Connexion**.
- Sélectionnez **Précédent** pour revenir aux **Réglages**.

TOUCHE PRÉCÉDENT

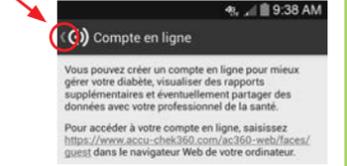


L'application et votre compte en ligne sont maintenant connectés et vous pouvez procéder à un transfert de données.

Liaison du glycomètre avec un dispositif mobile



SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

- Dans l'application, sélectionnez **Réglages/Essentiels > Lier le glycomètre**.
- Si un message correspondant s'affiche, assurez-vous que la technologie sans fil **Bluetooth®** est activée.
- Sélectionnez **Suivant** pour activer les fonctions **Envoi automatique** et **Synchronisation de l'heure**.

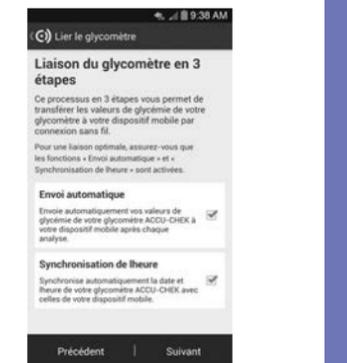

SUR VOTRE GLYCOMÈTRE

- Allumez le glycomètre et appuyez sur la touche **OK** ou **OK** pour naviguer dans le menu et sur la touche **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.
- Sélectionnez **Réglages > Sans fil > Oui**.



**REMARQUE** : le code qui s'affiche est valide pendant 90 secondes.



SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

- Lorsque le code s'affiche à l'écran du glycomètre, sélectionnez **Suivant** dans l'application.
- Sélectionnez **Accu-Chek**. (Attendez l'ouverture du menu contextuel.)
- Saisissez le code affiché à l'écran du glycomètre dans l'application.
- Faites disparaître le clavier et sélectionnez **OK** pour confirmer le code.
- Attendez la fin de la liaison.
- Sélectionnez **Fermer** ou **Enregistrer le glycomètre** après l'affichage du message **Liaison réussie**.

ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION



Envoi d'un résultat de glycémie sur votre dispositif mobile



SUR VOTRE GLYCOMÈTRE

Une fois la liaison établie, éteignez le glycomètre avant d'effectuer une analyse de glycémie. Après avoir effectué correctement une analyse de glycémie, suivez les instructions suivantes pour pouvoir envoyer le résultat de glycémie sur votre dispositif mobile.



- Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter un marquage au résultat de glycémie.
- Appuyez sur la touche **OK** ou **OK** pour mettre en surbrillance le marquage désiré et appuyez sur la touche **OK** pour le sélectionner. Appuyez sur la touche **OK** pour envoyer le résultat de glycémie.



SUR VOTRE DISPOSITIF MOBILE

- Votre résultat de glycémie s'affiche sur l'écran d'accueil de l'application.



Le nom et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées du groupe Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise à un contrat de licence.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT et ACCU-CHEK 360° sont des marques de Roche.

MISE À JOUR : 2014-02

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.accu-check.com](http://www.accu-check.com)



© 2015 Roche Diabetes Care  
07191197002-0915

